

# CONTROL DE INFECCIÓN

- Autoclaves
- Baberos
- Bobinas de esterilización
- Bolsas autoadhesivas
- Bolsas de recogida de residuos
- Celulosas
- Cubrecamillas
- Cuidado personal y de pacientes
- Desinfección de instrumental
- Desinfectantes de superficies
- Detergentes para instrumental
- Guantes
- Hojas y láminas de esterilización
- Incontinencia
- Productos de barrera
- Termoselladoras

## · AUTOCLAVES ·

### AUTOCLAVE ELARA 9D CLASE B CON GENERADOR DE VACÍO



- Cámara de 19.8 litros.
- Alto rendimiento de Clase B con generador de vapor incorporado.
- Sistema de Control avanzado con pantalla multicolor.
- Descarga de los datos del ciclo a su dispositivo de memoria USB.
- Función incorporada de comprobación de la calidad del agua.
- Puerta autoblocante con doble mecanismo seguridad.

El autoclave de sobremesa Elara 9D es un autoclave Clase B, diseñado para las necesidades de las clínicas modernas, en las que se espera que los autoclaves cumplan con los estándares internacionales más sofisticados y operen cada día en forma ininterrumpida. Los autoclaves Elara están diseñados para las necesidades de esterilización de las clínicas médicas, dentales y veterinarias.

Cámara de acero inoxidable 316L con acabado de electro-pulido, de mayor duración que las cámaras de acero inoxidable 304. Puerta de acero inoxidable con pulido tipo espejo. Altamente resistente a la corrosión.

El llenado frontal de agua permite utilizar el espacio libre por encima del autoclave. Es posible el llenado de agua por la parte superior. Puerta de acero inoxidable con pulido tipo espejo. Altamente resistente a la corrosión.

Puerta con bloqueo automático, diseñada para poder ser abierta o cerrada con una sola mano.

Le permite al usuario establecer el horario en el que el esterilizador pasará a consumir un mínimo de energía.

Al fijar una hora de inicio retardado, Ud. puede operar su esterilizador cuando los precios de la energía eléctrica son bajos, como por ejemplo, después del horario de trabajo.

Dos mecanismos diferentes de bloqueo impiden que la puerta se abra mientras la cámara está presurizada. El ciclo no comienza si la puerta no está cerrada. La puerta no se abrirá antes de que la presión de la cámara baje a la presión atmosférica.

Ud. obtiene mayor espacio en las bandejas/charolas, en comparación con otros autoclaves que ofrecen cámaras de 17 a 20 litros.

Mayor capacidad en cada ciclo significa menos ciclos por día, ahorrando energía y agua.

El rendimiento de Clase B se logra con una bomba de vacío incorporada, utilizada para la remoción fraccionada del aire por pre-vacío, eliminando las bolsas de aire de todos los tipos de carga y maximizando la penetración eficiente del vapor en toda la carga. Al finalizar la etapa de esterilización, se utiliza la bomba de vacío para el secado.

Siendo una empresa familiar, Tuttnauer viene fabricando productos por más 90 años, ganándose una excelente reputación por su calidad, alto rendimiento, características sofisticadas y su capacidad para satisfacer las expectativas del cliente. Más de 350 000 autoclaves instalados en todo el mundo son la prueba de la confianza que merecen los productos para la esterilización y el control de infecciones de Tuttnauer.

### AUTOCLAVE ELARA 11D CLASE B CON GENERADOR DE VAPOR

Con un generador de vapor incorporado, el Elara 11D es un autoclave de sobremesa capaz de operar en forma diaria sin interrupción, ofreciendo un rendimiento, eficiencia y seguridad excepcionales.

Poco espacio, gran rendimiento: Cumpliendo con los estándares y requisitos internacionales más estrictos y actuales, este autoclave de sobremesa le ofrece un rendimiento de clase B de alta velocidad con un potente generador de vapor incorporado.

6 bandejas grandes: Un 30% de espacio adicional significa que su equipo le ahorra tiempo al realizar menos ciclos de esterilización.

Puerta con cierre automático: Fácil de usar con una mano, la puerta de acero inoxidable pulida a espejo tiene un doble mecanismo de seguridad.

Ahorro de tiempo: El llenado de agua se encuentra en la parte frontal del autoclave para facilitar el acceso. Se puede también optar por las funciones de llenado de agua automático.

Pantalla Multi-Color Intuitiva: El panel LCD de color con interfaz multilingüe le brinda una fácil lectura de los parámetros y valores en tiempo real. Navegue con un teclado simple de 3 botones.

Fácil transferencia de datos: Transfiera los datos del ciclo a su PC por medio de USB o wireless con el software de monitoreo remoto opcional. Puede imprimir con una impresora térmica opcional incorporada.

Ahorro de energía: Funciones de bajo consumo de energía y ahorro inteligente de energía: ahorre un 30% en costos de energía.



· AUTOCLAVES ·

**CAJA PARA INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE**

Cajas para instrumental de acero inoxidable quirúrgico de alta calidad.  
Diferentes medidas disponibles.

**MEDIDA:** 18 X 10 X 3 cm.

**REFERENCIA:** 300514 - UNIDAD

**MEDIDA:** 20 X 10 X 5 cm.

**REFERENCIA:** 300515 - UNIDAD



**CEPILLO LIMPIA INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE**

Cepillo para limpieza de instrumental, con cerdas de acero.  
Su mango estable con muescas para dedos permite un manejo seguro del cepillo.  
Longitud de 18 cm.

**REFERENCIA:** 899-2135 - PACK DE 3 UNIDADES

**ESTROPAJOS SINTÉTICOS PARA LIMPIEZA DE INSTRUMENTAL**

Estropajos sintéticos diseñados para desincrustar suciedad muy adherida al material.

Medida: 112 x 79 mm.

**REFERENCIA:** 45602 - PACK DE 3 UNIDADES



· AUTOCLAVES ·

· Test de comprobación e indicadores ·

**CINTA ADHESIVA INDICADORA PARA VAPOR DE AGUA**

Cinta adhesiva fabricada en Papel Crepado blanco tratado y barnizado, impreso con un indicador químico que cambia de color en procesos de esterilización por vapor de agua, en ciclos de 121 y 134°C.

Medidas: 19 mm. x 55 m.

Grosor del papel: 0,17 mm.

Libre de látex y plomo.

**REFERENCIA:** 122001 - UNIDAD

**CINTA ADHESIVA INDICADORA PARA CALOR SECO**

**REFERENCIA:** 122003 - UNIDAD



**TEST BOWIE DICK**

Paquete preparado para pruebas tipo Bowie & Dick.

Soporte de papel pelliculado con condiciones especiales de permeabilidad.  
Tinta virable sensible a la presencia de vapor de agua. Conjunto de cartoncillos absorbentes de relleno, envoltura en caja de cartón.

Aptas para Vapor de agua en ciclos de prevacío de 121 y 134°C.

Medidas: 130 x 100 x 17 mm.

**REFERENCIA:** BD-108 - CAJA DE 25 UNIDADES



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

## TIRA CONTROL QUÍMICO POR VAPOR

Tiras para el control de los paquetes procesados por vapor a 134° C (4 minutos) y 121° C (20 minutos) indistintamente. Indicadores multiparamétricos de Clase 4.

Calibrados mediante esterilizadores de laboratorio tipo B.I.E.R., provistos de visor para el interior de cámara, realizada según los ciclos fijados en las normas internacionales para 134° C y 121° C.

La calibración se realiza por lotes completos mediante bioindicadores asociados (*Geobacillus Stearothermophilus*) con inclusión de un color standard o de referencia en cada uno de los indicadores fabricados.


Permite la comprobación de resultados por inspección visual. Después de expuestos los indicadores a proceso de esterilización por vapor, comparar el color resultante de la zona reactiva con la flecha de color standard.

Cada control va marcado además de con el indicador de color standard, con el número de lote que permite realizar la trazabilidad del producto. En el interior de cada caja se encuentra una etiqueta en la que se indica el número de lote y la fecha de caducidad correspondiente al mismo, que se establece en cinco años a partir de la fecha de fabricación.

Etiquetado conforme EN-980. Envasado en caja de cartón resistente y envueltas en bolsa de plástico que garantiza la integridad del producto tanto para el traslado como para el almacenamiento.

Medida de cada tira: 105 x 18 mm.

**REFERENCIA: 105-232 - CAJA DE 250 UNIDADES**

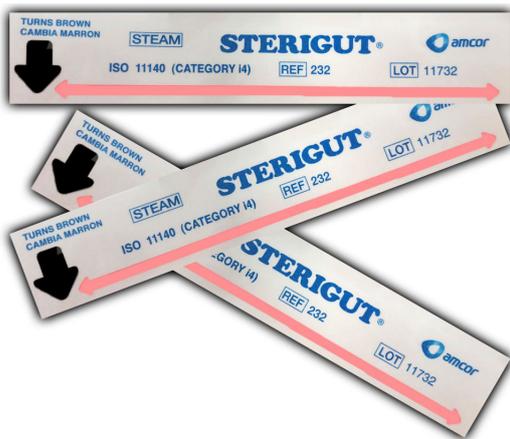

## CINTA ADHESIVA INDICADORA PARA VAPOR DE AGUA

Indicador químico multivariable para vapor de agua.

Soporte de cartulina impresa con indicador químico para esterilización por vapor, peliculada en superficie para evitar la migración de las tintas de textos y virables. Aptas para Vapor de agua en ciclos de 121 y 134°C.

**REFERENCIA: 12135229 - CAJA DE 250 UNIDADES**

## INDICADOR BIOLÓGICO EZ TEST VAPOR

Ampolla de polipropileno conteniendo:

Vial de cristal con medio de cultivo con indicador de pH inocuo para los microorganismos inoculados.

Tira impregnada con una población conocida de *Geobacillus Stearothermophilus*.

Etiqueta exterior con indicación del proceso de esterilización apropiado, control de proceso, N° lote.

Filtro de alta barrera biológica.

Tapón marrón indicativo de proceso por vapor.

Con cambios de color del medio de cultivo fáciles de interpretación.

Con espacio para rotular datos.

Ampolla de total hermeticidad después de su activación tras el proceso.

Envasado de forma que garantiza la integridad del producto en su traslado y su almacenamiento.

**REFERENCIA: 24801EZ00 - UNIDAD**

**REFERENCIA: 24801EZ25 - CAJA DE 25 UNIDADES**

**EZ TEST® (STEAM)**



## TIRA INDICADORA TEST HELIX BOWIE-DICK

Prueba de extracción tipo Helix para Vapor de agua.

Medida: 1,5 metros x 2 mm de lumen, tira de 6 x 70 mm.

Cartucho y tubo de Poliamida y tira de papel autoadhesivo.

Aptas para Vapor de Agua entre 121 y 135°C.

REFERENCIA: 250BDN - CAJA DE 250 UNIDADES

PRECIO: 494,80 € + 21% IVA



## · BABEROS ·



### BABERO DESECHABLE CON RECEPTÁCULO

Babero desechable con receptáculo de 10 cm.

Medidas del babero: 60 x 40 cm.

REFERENCIA: 122003 - CAJA DE 100 UNIDADES

### BABERO DESECHABLE CON RECEPTÁCULO

Babero desechable con receptáculo.

Medidas del babero: 37 x 66 cm.

REFERENCIA: BABERO-LI - CAJA DE 500 UNIDADES



### BABERO REUTILIZABLE DE PVC RIZO CON CINTAS

Babero reutilizable de PVC con cintas.

Medidas del babero: 90 x 50 cm.

REFERENCIA: VAR2048 - UNIDAD

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

**· BOBINAS DE ESTERILIZACIÓN ·**

**BOBINA MIXTA DE ESTERILIZACIÓN UNIDIX**

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
MRP1040	50 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1041	75 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1042	100 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1043	125 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1044	150 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1045	200 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1046	250 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1047	300 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1050	350 mm. X 200 m.	Unidad
MRP1048	400 mm. X 200 m.	Unidad

**BOBINA MIXTA DE ESTERILIZACIÓN AMCOR**

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
310838	50 mm. X 200 m.	Unidad
300085	75 mm. X 200 m.	Unidad
300086	100 mm. X 200 m.	Unidad
300087	120 mm. X 200 m.	Unidad
300088	150 mm. X 200 m.	Unidad
300089	210 mm. X 200 m.	Unidad
300090	250 mm. X 200 m.	Unidad
300091	300 mm. X 200 m.	Unidad
300092	400 mm. X 200 m.	Unidad

**BOBINA MIXTA BOP**

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
92BOP10100	100 mm. X 100 m.	Caja de 8 unidades
92BP15100	150 mm. X 100 m.	Caja de 4 unidades
92BP20200	210 mm. X 200 m.	Caja de 4 unidades
92BOP25100	250 mm. X 100 m.	Caja de 2 unidades
92BP042100	420 mm. X 100 m.	Caja de 2 unidades
92BP20200	210 mm. X 200 m.	Caja de 4 unidades
92BP25200	250 mm. X 200 m.	Unidad

## BOBINA MIXTA CON FUELLE

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
1203101040	100 mm. X 40 mm. X 100 m.	Unidad
1203151040	150 mm. X 50 mm. X 100 m.	Unidad
1203201060	200 mm. X 50 mm. X 100 m.	Unidad
1203251060	250 mm. X 60 mm. X 100 m.	Unidad
94BF30100	300 mm. X 60 mm. X 100 m.	Unidad
1203401080	400 mm. X 80 mm. X 100 m.	Unidad

## · BOLSAS AUTOADHESIVAS ·

### BOLSAS AUTOADHESIVAS UNIDIX

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
120657100	57 mm X 100 mm	Caja de 200 unidades
120670230	70 mm X 230 mm	Caja de 200 unidades
120690135	90 mm X 135 mm	Caja de 200 unidades
12059023	90 mm. X 230 mm.	Caja de 300 unidades
120690520	90 mm X 520 mm	Caja de 200 unidades
1206100230	100 mm. X 230 mm.	Caja de 200 unidades
120690135	90 mm X 135 mm	Caja de 200 unidades
1206135260	135 mm. X 260 mm.	Caja de 200 unidades
1206135355	135 mm. X 355 mm.	Caja de 200 unidades
1206150230	150 mm X 230 mm	Caja de 200 unidades
1206190330	190 mm X 330 mm	Caja de 200 unidades
1206200330	200 mm. X 330 mm.	Caja de 200 unidades
1206230365	230 mm X 365 mm	Caja de 200 unidades

## · BOLSAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS ·



### BOLSA DE BASURA CON AUTOCIERRE AZUL 55 X 55

Bolsa de basura azul pequeña 55 X 55 cm. con cierre fácil, para recogida de residuos en hogar o negocio.

Rollos de 15 usos / bolsas.

REFERENCIA: 2043002 - CAJA DE 50 ROLLOS

### BOLSA DE BASURA CON AUTOCIERRE NEGRA 55 X 55

Bolsa de basura azul pequeña 55 X 55 cm. con cierre fácil, para recogida de residuos en hogar o negocio.

Rollos de 15 usos / bolsas.

REFERENCIA: 080201 - CAJA DE 50 ROLLOS



### BOLSA DE BASURA CON AUTOCIERRE NEGRA 85 X 105

Bolsa de basura negra grande 85 X 105 cm. con cierre fácil, para recogida de residuos en hogar o negocio.

Rollos de 6 usos / bolsas.

REFERENCIA: 204301 - CAJA DE 50 ROLLOS

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

**· CELULOSAS ·****· CELULOSAS ·****· Bobinas de papel secamanos ·****ROLLO SECAMANOS MINI DE PASTA 1 CAPA**

Papel 100% de pasta de celulosa de 1 capa. Presentación en liso con precorte. Indicado en los entornos profesionales de mucho trabajo con sustancias que manchan, cocinas profesionales, talleres, restaurantes, etc. Son duros para los que requieren las garantías sanitarias más exigentes. Alta capacidad de absorción y resistencia debido a su alto gramaje. No se deshace al mojarlo, muy resistente y de gran suavidad.



Ancho de 19,5 cm. y longitud de 130 metros.

Peso aproximado de la bobina de 550 gramos.

REFERENCIA: 09808 - CAJA DE 12 UNIDADES

**ROLLO SECAMANOS MINI DE PASTA 2 CAPAS**

REFERENCIA: 004142000 - CAJA DE 12 UNIDADES

**ROLLO SECAMANOS 2 CAPAS GOFRADO**

La perfecta solución para garantizar un secado de manos rápido, higiénico y cómodo, en lavabos con una elevada afluencia de público. En formatos dos capas, mantiene siempre su absorción con un agradable tacto. 100% celulosa, de gran calidad, óptima suavidad y elevada capacidad de absorción.



Ancho de 21 cm. y longitud de 150 metros.

Peso aproximado por bobina de 1200 gramos.

REFERENCIA: 5664RBP20 - CAJA DE 6 UNIDADES

**ROLLO SECAMANOS 2 CAPAS GOFRADO PASTA**

REFERENCIA: 63345481 - CAJA DE 6 UNIDADES

**ROLLO SECAMANOS 2 CAPAS GOFRADO**

REFERENCIA: 004REC21000 - CAJA DE 6 UNIDADES

**ROLLO SECAMANOS 2 CAPAS ECO-PASTA LISO**

REFERENCIA: 004R2000 - CAJA DE 6 UNIDADES

**· CELULOSAS ·****· Cubrecamillas ·****ROLLO CUBRECAMILLAS PLASTIFICADO**

Rollos cubrecamillas plastificado precortado, hecha de un tejido muy absorbente y de una capa de polietileno. El acoplamiento y estampación de los dos materiales asegura una alta resistencia al desgarro y una impermeabilidad perfecta, papel 26 gr/m<sup>2</sup>.

Exento de látex.

MEDIDA: 50 cm. X 70 m. - COLOR AZUL

REFERENCIA: 09800 - CAJA DE 6 UNIDADES

MEDIDA: 58 cm. X 80 m. - COLOR AZUL

REFERENCIA: 870-2 - CAJA DE 6 UNIDADES



**MEDIDA: 50 cm. X 70 m. - UNA CAPA NATURAL**  
**REFERENCIA: 09802-1 - CAJA DE 6 UNIDADES**

**MEDIDA: 58 cm. - UNA CAPA SIN PRECORTE**  
**REFERENCIA: 09802/1 - CAJA DE 6 UNIDADES**



**MEDIDA: 60 cm. X 70 m. - UNA CAPA**  
**REFERENCIA: 09802 - CAJA DE 6 UNIDADES**

**MEDIDA: 60 cm. X 70 m. - DOS CAPAS GOFRADO**  
**REFERENCIA: 060126058P26 - CAJA DE 6 UNIDADES**

**MEDIDA: 60 cm. X 70 m. - DOS CAPAS PASTA PRECORTADO**  
**REFERENCIA: 006C1000 - CAJA DE 6 UNIDADES**

**MEDIDA: 58 cm. X 80 m. - DOS CAPAS PRECORTADO**  
**REFERENCIA: 074659P-P - CAJA DE 9 UNIDADES**

### · CELULOSAS ·

### · Paños de aseo y multiusos ·



#### **TOALLAS SPUNLACE UNIDIX**

**MEDIDA: 30 X 40 cm.**  
**REFERENCIA: 00395 - CAJA DE 100 UNIDADES**



#### **TOALLAS SPUNLACE**

**MEDIDA: 40 X 80 cm.**  
**REFERENCIA: 05S/165 - CAJA DE 25 UNIDADES**

### · CELULOSAS ·

### · Pañuelos faciales ·



**PAÑUELO DE PAPEL KLEENEX CLASS**  
**REFERENCIA: 09996 - CAJA DE 100 UNIDADES**



**PAÑUELO TIPO KLEENEX CELINES**  
**REFERENCIA: CELINES - CAJA DE 100 UNIDADES**

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

**TOALLA LAMBRACEL SUPERPLUS (dispensador)**
**MEDIDA: 20 X 27 cm.**
**REFERENCIA: 203250 - CAJA DE 130 UNIDADES**
**TOALLA LAMBRACEL SUPERPLUS (paquete)**
**MEDIDA: 20 X 27 cm.**
**REFERENCIA: 2030C50 - PAQUETE DE 120 UNIDADES**
**TOALLA LAMBRACEL (dispensador)**
**MEDIDA: 20 X 27 cm.**
**REFERENCIA: 2020C20 - CAJA DE 300 UNIDADES**
**TOALLA LAMBRACEL SUPERPLUS (paquete)**
**MEDIDA: 40 X 27 cm.**
**REFERENCIA: 2033C50 - CAJA DE 65 UNIDADES**

**· CELULOSAS ·**
**· Papel higiénico ·**
**PAPEL HIGIÉNICO 2 HOJAS LISMA**

Papel higiénico de alto rendimiento, de gran suavidad, abullonado y resistente. De textura suavizada y exclusivo precorte. Rollos de 22 metros.

**REFERENCIA: 5660102B72/12 - PACK DE 12 UNIDADES**

**PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL LISMA**


REFERENCIA	CALIDAD	UNIDAD DE VENTA
0202P245	Segunda	Paquete de 18 unidades
02040P	Extra micro 400 gr.	Paquete de 18 unidades
56602020M	Segunda de dos hojas	Paquete de 18 unidades
02040M245	Extra de dos hojas	Paquete de 18 unidades
02020M60	Segunda y tubo ancho	Paquete de 18 unidades

**PRECIO + 21% IVA**
**PAPEL HIGIÉNICO AZUL MICRO-ENCOLADO**
**REFERENCIA: 101222112 - 8 PAQUETES DE 12 UDS**


· CELULOSAS ·

· Servilletas ·



**SERVILLETA DE PAPEL DE 1 CAPA**  
MEDIDA: 30 X 30 cm.  
REFERENCIA: 09997 - CAJA DE 4800 UNIDADES


**SERVILLETA DE PAPEL DE 2 CAPAS**  
MEDIDA: 30 X 30 cm.  
REFERENCIA: 09998 - PAQUETE DE 100 UNIDADES

**SERVILLETAS DE PAPEL DE 3 CAPAS**  
MEDIDA: 30 X 30 cm.  
REFERENCIA: 09999 - PAQUETE DE 100 UNIDADES

**SERVILLETA DE PAPEL DE 2 CAPAS**  
MEDIDA: 40 X 40 cm.  
REFERENCIA: 09994 - PAQUETE DE 100 UNIDADES

· CELULOSAS ·

· Toallitas secamanos ·

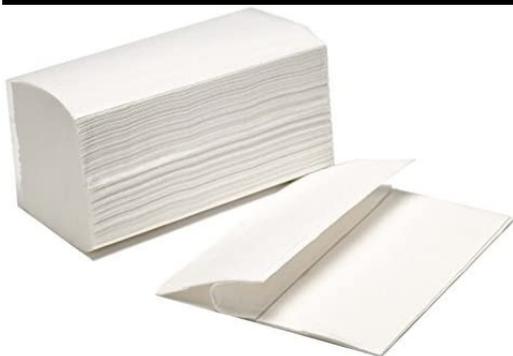

**TOALLA Z-200 NATURAL**  
REFERENCIA: 09250AP50224 - CAJA DE 24 PAQUETES DE 200 UNIDADES

**TOALLA Z-TISSUE 2 CAPAS**  
REFERENCIA: 09250AP50318 - CAJA DE 20 PAQUETES DE 200 UNIDADES

**TOALLA Z PASTA LISA 2 HOJAS**  
REFERENCIA: CL22220 - CAJA 3920 UNIDADES

· CUBRE CAMILLAS ·



**ROLLO CUBRECAMILLA BLANCO PP ABSORBENTE**  
MEDIDA: 60 cm. X 100 m.  
REFERENCIA: 0000521 - UNIDAD

**ROLLO CUBRECAMILLA BLANCO PP 20 gr/m2**  
MEDIDA: 58 cm. X 85 m.  
REFERENCIA: 20452 - CAJA DE 7 UNIDADES

**SÁBANA CUBRECAMILLA AJUSTABLE PLASTIFICADA**  
MEDIDA: 95 cm. X 220 cm. - GRAMAJE: 40 gr.  
REFERENCIA: 10/05/140 - CAJA DE 100 UNIDADES



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

**SÁBANA CUBRECAMILLA AJUSTABLE DE PP UNIDIX**


REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	UNIDAD DE VENTA
475-20	80 cm. X 210 cm.	Blanco	Caja de 100 unidades
421	95 cm. X 210 cm.	Blanco	Caja de 100 unidades
475-E	80 cm. X 210 cm.	Blanco	Caja de 100 unidades
U100	100 cm. X 220 cm.	Blanco	Caja de 100 unidades
475-30	80 cm. X 210 cm.	Azul claro	Caja de 100 unidades
95220	95 cm. X 220 cm.	Azul claro	Caja de 100 unidades
475-AL	80 cm. X 210 cm.	Azul claro	Caja de 100 unidades
475-A	80 cm. X 210 cm.	Azul oscuro	Caja de 100 unidades
476	95 cm. X 220 cm.	Azul oscuro	Caja de 100 unidades
421N	95 cm. X 210 cm.	Negro	Caja de 100 unidades

PRECIO + 21% IVA

**· CUIDADO PERSONAL Y DE PACIENTES ·**
**· CUIDADO PERSONAL Y DE PACIENTES ·**
**· Higiene dental ·**
**HILO DENTAL CON CERA MENTA**

MEDIDA: 180 m.

REFERENCIA: 1554783 - UNIDAD

PRECIO: **12,74 €** + 21% IVA


**VARIOS**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA
CEPILLO-DIENTES	Cepillo de dientes para adulto	Unidad
CBX6266	Cepillo lingual para limpieza	Unidad
3.050	Pasta dental + elixir de 100 ml.	Unidad
CBX3852	Pasta dental de 75 ml.	Unidad

PRECIO + 21% IVA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE VENTA
20951	Agua De Colonia Royale - Envase De 750 ml.	Unidad
3011191600001	Alicate Corta Uñas 12 cm. - Unidad	Unidad
CBX4687	Body Milk Clinibax Care 1000 ml.	Caja de 15 unidades
ASE1069	Body Milk Clinibax Care 1000 ml.	Unidad
29112018	Body Milk Mussvital Oliva- Envase De 400 ml.	Unidad
L+D0324	Brocha de afeitar	Unidad
ADA9233	Cepillo para pies	Unidad
20222	Cepillo de uñas de plástico "Martin"	Unidad
CBX4689	Champú Clinibax Care 1000 ml.	Caja de 15 unidades
CBX4688	Champú Clinibax Care 1000 ml.	Caja de 15 unidades
8435135514009	Crema Hidratante Urea Dermafeet 20% - Envase De 480 gr.	Unidad
L+D0323	Jabón de afeitar Bea - Envase de 50 gr.	Unidad
ASE0017	Esponja Jabonosa Espuma 12 X 20 cm.	Caja de 4000 unidades
ASE0016	Esponja jabonosa de fibra 12 X 20 cm. (100 gr./m2)	Caja de 3000 unidades
CBX9099	Espuma de afeitar - Envase de 250 ml.	Caja de 250 unidades
ASE0044	Gel - Champu en formato familiar - Envase de 1250 ml.	Caja de 10 unidades
000131880/1	Jabón líquido blanco - Envase de 1 litro	Unidad
0010	Jabon de manos nacarado - Envase de 5 litros	Unidad
03-10	Lima De Uñas Negra Better (120/180)	Unidad
03-11	Lima para uñas largas color rojo y naranja	Pack de 4 unidades
7000830	Maquinilla de afeitar de 4 hojas Titanium desechable	Pack de 4 unidades
ASE0073	Maquinilla de afeitar Bic 1 Sensitive	Bolsa de 5 unidades
ADA0185	Peine largo de 37 cm.	Unidad
CBX9298	Peine marrón Better	Unidad
11400009	Pulidor de uñas en taco blanco	Unidad
68803	Toallita de adulto con loción	Pack de 60 unidades
051508	Toallitas para bebé Baby Cream	Pack de 80 unidades
9272	Toallita Higiene Personal Cavilion	Caja de 96 unidades
321629162363	Toallita Húmeda Molicare Skin 200 mm. X 300 m.	Pack de 50 unidades
219766.4	Ureadin Loción Rehidratante Esencial - Envase 1 Litro	Unidad

**· DESINFECCIÓN DE INSTRUMENTAL ·**
**INSTRUNET POLVO INSTRUMENTAL - SOBRE DE 50 gr**
**REFERENCIA: 29069002 - UNIDAD**

**INSTRUNET ANIOXYDE 1000 INSTRUMENTAL 1 LITRO**

Desinfectante de Alto Nivel con Ácido Peracético para instrumental clínico, material endoscópico, material termosensible y productos sanitarios. Se recomienda la realización de una limpieza previa con un detergente enzimático antes de llevar a cabo un proceso de desinfección.

**REFERENCIA: 4855 - UNIDAD**
**INSTRUNET ANIOXYDE 1000 INSTRUMENTAL 5 LITROS**
**REFERENCIA: 2917 - CAJA DE 2 UNIDADES**

**INSTRUNET STERANIOS 2 % NG - GLUTARALDEHIDO**

Desinfectante de alto nivel para productos sanitarios Steranios 2% de Instrunet, para material quirúrgico y médico, material de endoscopia y material termosensible.

Producto listo para usar.

**REFERENCIA: 4848 - UNIDAD**

**· DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES ·**

**DESINFECTANTE SPRAY SUPERFICIES NDP SURFAPLUS**

Desinfectante con alcohol para toda clase de superficies. Amplio espectro biocida y rapidez de acción.

Es compatible con todo tipo de materiales.

Elimina el 99,99% de Bacterias, Hongos y Virus con cubierta (incluido Coronavirus).

**ENVASE: 750 ml.**
**REFERENCIA: SF750 - UNIDAD**
**BACILLOL 30 SPRAY ESPUMA PARA SUPERFICIES**

Desinfectante rápido en formato pulverizador de espuma, contiene un 30% de alcohol y es perfectamente compatible con todas las superficies delicadas (plexiglás, pantallas, luces quirúrgicas o sondas de ultrasonido). Está especialmente indicado para la desinfección en ámbitos sanitarios o en centros de belleza.

**ENVASE: 750 ml.**
**REFERENCIA: 981342 - UNIDAD**




### **INCIDIN FOAM SPRAY ESPUMA SUPERFICIES**

Incidin® Foam es un limpiador desinfectante en espuma en base alcohólica de rápida actuación, listo para su uso. Contiene Glucoprotamina dentro de sus agentes activos, y no contiene aldehídos. De amplio espectro bactericida, levuricida y viricida (incluyendo rotavirus, adenovirus, vacciniavirus, virus de la Hepatitis B, virus del SIDA).

Con un agradable aroma cítrico, dejando una sensación de limpieza para los pacientes.

Área de aplicación: indicado para superficies de dispositivos médicos. Adecuado para cualquier superficie resistente al alcohol.

**ENVASE: 750 ml.**

**REFERENCIA: 3046010 - UNIDAD**

### **INSTRUNET SURFASAFE PREMIUM SPRAY ESPUMA SUPERFICIES**

Espuma detergente desinfectante para la limpieza y desinfección de las superficies de productos sanitarios y estructuras externas de equipamientos médicos, productos sanitarios no invasivos y no sumergibles.

**ENVASE: 750 ml.**

**REFERENCIA: 4813 - UNIDAD**



### **MELISEPTOL RAPID BRAUN DESINFECTANTE DE SUPERFICIES**

Meliseptol® rapid es un desinfectante alcohólico preparado para usar, de acción rápida, indicado para pequeñas superficies y material médico como equipos de cirugía ambulatoria, camas de hospital, camillas, fundas de colchón, sillas de tratamiento y otras pequeñas superficies resistentes al alcohol de consultas médicas y hospitales

**ENVASE: 750 ml.**

**REFERENCIA: 19911 - UNIDAD**

### **DESINFECTANTE NDP SURFAPLUS SUPERFICIES Y MOBILIARIO**

Desinfectante con alcohol para toda clase de superficies. Amplio espectro biocida y rapidez de acción. Es compatible con todo tipo de materiales.

Su formulación con alto contenido en alcohol (30%), asegura un secado rápido y un acabado brillante.

**ENVASE: 1500 ml.**

**REFERENCIA: SF1500 - UNIDAD**



### **DESINFECTANTE SUMA BAC MULTIPURPOSE D10**

Suma Bac D10 es un detergente desinfectante concentrado para la limpieza y desinfección en un solo paso de todas las superficies en establecimientos donde se prepare comida o se manipulen alimentos.

**ENVASE: 1400 ml.**

**REFERENCIA: 006230 - PACK DE 2 UNIDADES**

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

## SORF PLUS LIMPIADOR DESINFECTANTE BACTERICIDA-FUNGICIDA

Es un limpiador general desinfectante con propiedades bactericidas y fungicidas para su uso en industrias e instalaciones donde se utilicen o manipulen alimentos.

**ENVASE:** 5000 ml.

**REFERENCIA:** 40012 - UNIDAD



## DESINFECTANTE VIA AEREA NDP AIR TOTAL

NDP Air Total+ Green CE es un producto para la desinfección de superficies de productos sanitarios por Vía Aérea. La válvula "one-shot" nebuliza el desinfectante en una sola aplicación, permitiendo el acceso del producto a rincones difícilmente accesibles mediante otros medios.

**ENVASE:** 300 ml.

**REFERENCIA:** AT+300/1 - UNIDAD

## SANIT DESINFECTANTE POR NEBULIZACIÓN

Desinfección aérea aplicable por nebulización. Potente desinfectante de ámbito clínico para asegurar un gran nivel de descontaminación sobre las zonas tratadas UNE-EN 1650, UNE-EN 1276 y AFNOR NF-T72-281. Apto para todo tipo de superficies y materiales.

**ENVASE:** 150 ml.

**REFERENCIA:** 9001159 - CAJA DE 12 UNIDADES



## TOALLITAS DESINFECTANTES ASEPTONET INSTRUM. Y SUPERF.

Las toallitas desinfectantes Aseptonet le permiten una rápida y cómoda desinfección de la consulta. Para la desinfección de superficies. Las toallitas Aseptonet son antibacterianas impregnadas con una solución bactericida, fungicida y vírica.

**MEDIDA:** 20 X 20 cm.

**REFERENCIA:** 907-0339 - PACK DE 100 UNIDADES

**MEDIDA:** 13 X 20 cm.

**REFERENCIA:** 902-3441 - BOTE DE 100 UNIDADES

**MEDIDA:** 13 X 20 cm.

**REFERENCIA:** 906-4429 - PACK DE 100 UNIDADES



## TOALLITAS DESINFECTANTES BACILLOL TISSUES

Toallitas desinfectantes de acción rápida impregnadas en solución desinfectante Bacillo 30 Foam para la limpieza de superficies y equipos médicos

**REFERENCIA:** 980503 - PACK DE 100 UNIDADES



## TOALLITAS WIP ANIOS EXCEL

Toallitas detergentes y desinfectantes para el tratamiento de las superficies, dispositivos médicos no sumergibles y no invasivos y limpieza de las vainas de los endoscopios durante el tratamiento preliminar antes de la inmersión para limpieza y desinfección.

REFERENCIA: 4827 - PACK DE 100 UNIDADES



## INSTRUNET INIBSA TOALLITAS

Las toallitas Inbsa son la solución para desinfectar aquellos elementos del box de difícil acceso para un desinfectante en formato spray, como por ejemplo los tubos de elementos rotatorios del sillón dental.

REFERENCIA: 2592 - PACK DE 120 UNIDADES

## KIT SURFACES NDP TOALLITAS DESINFECTANTE SUPERFICIES Y MOBILIARIO

NDP Kit Surfaces es un sistema de limpieza y desinfección de productos sanitarios no invasivos así como todo tipo de superficies. Las toallitas han sido fabricadas con un material altamente resistente y absorbente, y se presentan en un cubo que permite una fácil y cómoda dispensación.

REFERENCIA: KSMS+LB - PACK DE 720 UNIDADES



## · DETERGENTES PARA INSTRUMENTAL ·



## INSTRUNET JET PLUS 1 LITRO

Detergente enzimático de uso manual Instrunet Jet Plus. Formulación especial para restos orgánicos con base proteica y glucídica. Uso manual.

REFERENCIA: 1526842 - CAJA DE 6 UNIDADES

## INSTRUNET ENZIMATICO GPL INSTRUMENTAL

Detergente trienzimático con potente acción limpiadora. Limpieza y desincrustación manual de instrumental clínico y endoscópico.

REFERENCIA: 3903 - UNIDAD



Haga su pedido vía web, por teléfono o email



### INSTRUNET EZ + T PLUS

Detergente líquido cuatrienzimático con potente acción limpiadora.  
Limpieza y desincrustación manual del instrumental endoscópico e instrumental clínico.

REFERENCIA: 3979 - UNIDAD

**· GUANTES ·**

**· GUANTES ESTÉRILES ·**      **· Guantes de cirugía sin látex ·**

#### GUANTE SINTÉTICO NEOPRENO BIOGEL SKINSENSE

REFERENCIA	NÚMERO	UNIDAD DE VENTA
50955	5,5	Caja de 50 uds.
50960	6,0	Caja de 50 uds.
50965	6,5	Caja de 50 uds.
50970	7,0	Caja de 50 uds.
50975	7,5	Caja de 50 uds.
50980	8,0	Caja de 50 uds.
50985	8,5	Caja de 50 uds.
50990	9,0	Caja de 50 uds.



**PRECIO + 21% IVA**

#### GUANTE CIRUGÍA DURAPRENE PROTEXIS NEOPRENE SIN POLVO

REFERENCIA	NÚMERO	UNIDAD DE VENTA
50955	6,0	Caja de 50 uds.
50960	6,5	Caja de 50 uds.
50965	7,0	Caja de 50 uds.
50970	7,5	Caja de 50 uds.
50975	8,0	Caja de 50 uds.
50980	8,5	Caja de 50 uds.



**PRECIO + 21% IVA**

**· GUANTES ESTÉRILES ·**      **· Guantes de cirugía látex sin polvo ·**

#### GUANTE CIRUGÍA PROTEXIS LÁTEX ESSENTIAL SIN POLVO

REFERENCIA	NÚMERO	UNIDAD DE VENTA
2D72LE60	6,0	Caja de 50 uds.
2D72LE65	6,5	Caja de 50 uds.
2D72LE70	7,0	Caja de 50 uds.
2D72LE75	7,5	Caja de 50 uds.
2D72LE80	8,0	Caja de 50 uds.



**PRECIO + 21% IVA**

## GUANTE CIRUGÍA PROTEGRITY PROTEXIS LÁTEX MICRO

REFERENCIA	NÚMERO	UNIDAD DE VENTA
2D72NT55X	5,5	Caja de 50 pares
2D72NT60X	6,0	Caja de 50 pares
2D72NT65X	6,5	Caja de 50 pares
2D72NT70X	7,0	Caja de 50 pares
2D72NT75X	7,5	Caja de 50 pares
2D72NT80X	8,0	Caja de 50 pares
2D72NT85X	8,5	Caja de 50 pares



## GUANTE BIOGEL ECLIPSE

REFERENCIA	NÚMERO	UNIDAD DE VENTA
75160	5,5	Caja de 50 pares
75165	6,0	Caja de 50 pares
75170	6,5	Caja de 50 pares
75175	7,0	Caja de 50 pares
75180	7,5	Caja de 50 pares
75185	8,0	Caja de 50 pares



## · GUANTES ESTÉRILES ·

## · Guantes de plástico ·

### GUANTE DE PLÁSTICO ESTÉRIL

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
036019	MEDIANA	Caja de 100 uds.
05544/200	GRANDE	Caja de 100 uds.

PRECIO + 21% IVA



## · GUANTES DE EXPLORACIÓN ·

## · Guantes de látex sin polvo ·

### GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO UNIDIX

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
0505400	EXTRA PEQUEÑA	Caja de 100 uds.
0505401	PEQUEÑA	Caja de 100 uds.
0505402	MEDIANA	Caja de 100 uds.
0505403	GRANDE	Caja de 100 uds.
0505404	EXTRA GRANDE	Caja de 100 uds.



PRECIO + 21% IVA

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

**GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO BASIC TOUCH**

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
01033-XS	EXTRA PEQUEÑA	Caja de 100 uds.
01033-S	PEQUEÑA	Caja de 100 uds.
01033-M	MEDIANA	Caja de 100 uds.
01033-L	GRANDE	Caja de 100 uds.



· **GUANTES DE EXPLORACIÓN** ·

· **Guantes de nitrilo** ·

**GUANTES DE NITRILO AZUL SIN POLVO EUROGLOVES-E**


REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
05150	EXTRA PEQUEÑO	Caja de 200 uds.
05151	PEQUEÑO	Caja de 200 uds.
05152	MEDIANO	Caja de 200 uds.
05153	GRANDE	Caja de 200 uds.
05154	EXTRA GRANDE	Caja de 200 uds.

**GUANTES DE NITRILO AZUL SIN POLVO ECO -PLUS**

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
01039-S	PEQUEÑO	Caja de 100 uds.
01039-M	MEDIANO	Caja de 100 uds.
01039-L	GRANDE	Caja de 100 uds.



· **GUANTES DE EXPLORACIÓN** ·

· **Guantes de plástico** ·



**GUANTES DE PLÁSTICO VETERINARIA**  
REFERENCIA: 5546 - CAJA DE 100 UNIDADES



**GUANTES DE PLÁSTICO GRANULADO**  
REFERENCIA: 05542 - CAJA DE 100 UNIDADES

· GUANTES DE EXPLORACIÓN ·

· Guantes de vinilo sin polvo ·



GUANTES DE VINILO SIN POLVO “EUROGLOVES-E”

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
05600/200	EXTRA PEQUEÑO	Caja de 200 uds.
05601/200	PEQUEÑO	Caja de 200 uds.
05602/200	MEDIANO	Caja de 200 uds.
05603/200	GRANDE	Caja de 200 uds.
05604/200	EXTRA GRANDE	Caja de 200 uds.



GUANTES DE VINILO SIN POLVO EUROGLOVES PLUS

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
05800/200	EXTRA PEQUEÑO	Caja de 200 uds.
05801/200	PEQUEÑO	Caja de 200 uds.
05802/200	MEDIANO	Caja de 200 uds.
05803/200	GRANDE	Caja de 200 uds.
05804/200	EXTRA GRANDE	Caja de 200 uds.

· GUANTES DE MENAJE ·

· Guantes de plástico ·

GUANTE LÁTEX + NEOPRENO GRANDEUR-70

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
GG-321CB/7	7	Par
GG-321CB/8	8	Par
GG-321CB/9	9	Par
GG-321CB/10	10	Par



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

**DEDILES DE LÁTEX**

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
20113330-13	3 (PEQUEÑO)	Caja de 100 uds.
20113330-21	4 (MEDIANO)	Caja de 100 uds.
20113330-48	5 (GRANDE)	Caja de 100 uds.


**· HOJAS Y LÁMINAS DE ESTERILIZACIÓN ·**
**PAPEL CREPADO VERDE**

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
MCREPV50	50 X 50 cm.	Caja de 500 unidades
MCREPV75	75 X 75 cm.	Caja de 250 unidades
MCREPV90	90 X 90 cm.	Caja de 250 unidades
MCREPV100	100 X 100 cm.	Caja de 250 unidades
MCREPV120	120 X 120 cm.	Caja de 100 unidades

**PAPEL CREPADO VERDE**

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
12040404	40 cm. X 40 cm.	Caja de 500 unidades
12040505	50 cm. X 50 cm.	Unidad
12040606	60 cm. X 60 cm.	Caja de 500 unidades
12040707	75 cm. X 75 cm.	Unidad
12040808	80 cm. X 80 cm.	Unidad
12041010	100 cm. X 100 cm.	Unidad
12041212	120 cm. X 120 cm.	Caja de 125 unidades
EST0169	120 cm X 140 cm.	Caja de 125 unidades


**HOJAS DE PAPEL TST AZUL**

REFERENCIA	MEDIDA	UNIDAD DE VENTA
310906	60 cm. X 60 cm.	Caja de 500 unidades
TST075075	75 cm. X 75 cm.	Caja de 200 unidades
110PSP100100	100 cm. X 100 cm.	Caja de 200 unidades



### BOLSA DE ORINA PEDIÁTRICA PARA PREMATUROS URINOCOL BRAUN

- Bolsa abierta libre de PVC, con tubo de salida y tapón para recoger muestras intermitentes (análisis de laboratorio).
- Doble tubo de drenaje adaptable a conector sonda y/o jeringa.
- Diseño morfológicamente adaptado a la anatomía niño o niña, con adhesivo hipoalergénico y atraumático.
- Sellado del film altamente resistente a presiones excesivas, de gran seguridad y estanqueidad.
- Gramaje de la bolsa: 0,07 mm.
- Diámetro de la válvula de conexión 5,05mm a 8mm (conexión bolsas diuresis) y 3,5mm (conexión luer).
- Packaging individual con sistema de abertura.
- Capacidad aproximada 30 ml.
- Exento de látex.

REFERENCIA: 227571D - CAJA DE 50 UNIDADES

### BOLSA DE ORINA PEDIÁTRICA ESTÉRIL

Bolsa de orina pediátrica desechable estéril.  
Modelo sin válvula.  
Capacidad de 200 ml.

REFERENCIA: KJPUC200A - CAJA DE 100 UNIDADES



### BOLSA DE ORINA 2L ESTÁNDAR UNIDIX

Bolsa para la recogida y medición de orina con diferentes fines terapéuticos o diagnósticos. Sistema colector abierto, un solo uso.

No estériles, desechables.

Tubo de PVC de 900 mm. transparente.

Bolsa de PVC de 2000 ml. con escala cada 100 ml.

Dimensiones de la bolsa: 268 x 197 mm.

Corte e impresión por termosellado.

Sistema colector abierto.

Ojales de sujeción en ambas esquinas superiores.

Conector de PVC blanco y tapón PE azul.

Compatible con los conectores de las sondas y catéteres.

REFERENCIA: 20013200 - CAJA DE 200 UNIDADES

REFERENCIA: 20013200/1 - UNIDAD





### BOLSA DE ORINA DE PIERNA UNIDIX

Bolsa con válvula antireflujo para la recogida y medición de orina con diferentes fines terapéuticos o diagnósticos.

Diseñada principalmente para fijar a la pierna por su tamaño y puntos de sujeción.

No estériles, desechables.

Compuesta de PVC.

Capacidad nominal 750 ml. Transparente fondo blanco y escala medidora en azul.

Válvula antireflujo al inicio del tubo

Dimensiones: 260 x 150 mm.

Corte e impresión con termosellado.

Ojales de sujeción en las cuatro esquinas.

Grifo con parte blanca fija y apertura/cierre desplazando pieza azul hacia abajo/arriba.

Tubo de PVC translúcido de 500 mm. de largo.

Conector de PVC blanco con tapón de PE azul, compatible con las partes conectoras de los catéteres.

Con rugosidades exteriores.

**REFERENCIA: 20016 - CAJA DE 200 UNIDADES**



### BOLSA ORINA 2 LITROS CON GRIFO EN CRUZ UNIDIX

Bolsa con válvula antireflujo y grifo para la recogida y medición de orina con diferentes fines terapéuticos o diagnósticos.

El sistema de vaciado mediante grifo permite la extracción de la orina sin necesidad de manipular la conexión al catéter.

Disponible no estéril o estéril mediante Óxido de Etileno (Norma EN 1422).

Tubo de PVC translúcido de 900 mm. de largo.

Bolsa compuesta de PVC con capacidad de 2000 ml. Transparente con fondo blanco, y escala de medición azul cada 100 ml. Corte e impresión con termosellado y ojales de sujeción en las esquinas superiores.

Dimensiones de la bolsa: 268 x 197 mm.

Conector de PVC blanco con tapón de PE azul, compatible con las partes conectoras de los catéteres.

**MODELO: ESTÉRIL**

**REFERENCIA: 20018 - CAJA DE 100 UNIDADES**

**MODELO: NO ESTÉRIL**

**REFERENCIA: 20015200 - CAJA DE 200 UNIDADES**



### BOLSA ORINA CON GRIFO EN CRUZ JOLFAMAR

Grifo en cruz que facilita el vaciado y evita problemas en la apertura y goteos en el cierre.

Toma de muestras.

Estrangulador en tubo, para cerrar el flujo de orina.

Válvula antirretorno (VAR), mejora la higiene de la bolsa, evitando que la orina vuelva hacia atrás y evitando infecciones.

Embalaje de las bolsas de orina de 4 litros de 100 unidades, y de 150 unidades en el caso de las de 5 litros. Marca Jolfamar. Longitud del tubo de 1 metros, y diámetro de 8,8 mm.

Disponible en 4 y 5 litros.

**CAPACIDAD: 4 LITROS**

**REFERENCIA: 204120453 - UNIDAD**

**CAPACIDAD: 5 LITROS**

**REFERENCIA: 204120454 - UNIDAD**



### ORINAL CABALLERO CARTÓN DESECHABLE

Orinal de caballero de cartón desechable.  
Capacidad de 1000 ml.

REFERENCIA: LAB0022-1 - UNIDAD

REFERENCIA: LAB0022 - CAJA DE 16 UNIDADES



### ORINAL CABALLERO DE PLÁSTICO REUTILIZABLE

Orinal de caballero de plástico. Reutilizable y lavable.  
Capacidad de 1000 ml. y graduación cada 100 ml.

REFERENCIA: 20155 - UNIDAD



### CUÑA ORINAL FEMENINA DE CARTÓN DESECHABLE

Orinal femenino de cartón desechable. De un sólo uso.  
Capacidad de 1700 ml. y graduación.

REFERENCIA: LAB0023-1 - UNIDAD

REFERENCIA: LAB0023 - CAJA DE 50 UNIDADES



### CUÑA ORINAL FEMENINA DE PLÁSTICO REUTILIZABLE

Orinal femenino de plástico reutilizable.  
Asa para su sujeción.

REFERENCIA: 20156 - UNIDAD


**EMPAPADOR ROCPAD ADA**

**MEDIDA:** 60 X 40 cm.  
**REFERENCIA:** E6040/1 - BOLSA DE 30 UNIDADES

**MEDIDA:** 60 X 60 cm.  
**REFERENCIA:** E6060/1 - BOLSA DE 25 UNIDADES

**MEDIDA:** 60 X 90 cm.  
**REFERENCIA:** E6090-1 - BOLSA DE 25 UNIDADES



**MEDIDA:** 60 X 40 cm.  
**REFERENCIA:** 2030C50 - CAJA DE 240 UNIDADES

**MEDIDA:** 60 X 60 cm.  
**REFERENCIA:** E6060 - CAJA DE 150 UNIDADES

**MEDIDA:** 60 X 90 cm.  
**REFERENCIA:** E6090 - CAJA DE 150 UNIDADES


**EMPAPADOR MOLINEA NORMAL DE HARTMANN**

**MEDIDA:** 60 X 40 cm.  
**REFERENCIA:** 161220 - BOLSA DE 30 UNIDADES

**MEDIDA:** 60 X 60 cm.  
**REFERENCIA:** 1613208 - BOLSA DE 30 UNIDADES


**MEDIDA:** 60 X 90 cm.  
**REFERENCIA:** 1615208 - BOLSA DE 30 UNIDADES


**EMPAPADOR SABANINDAS DE INDAS**

**MEDIDA:** 60 X 60 cm.  
**REFERENCIA:** 1834012 - CAJA DE 150 UNIDADES


**MEDIDA:** 60 X 90 cm.  
**REFERENCIA:** 1834014 - CAJA DE 150 UNIDADES

**EMPAPADOR ID PROTECT PLUS**  
**MEDIDA: 60 X 90 cm.**  
**REFERENCIA: CBX0233 - CAJA DE 120 UNIDADES**

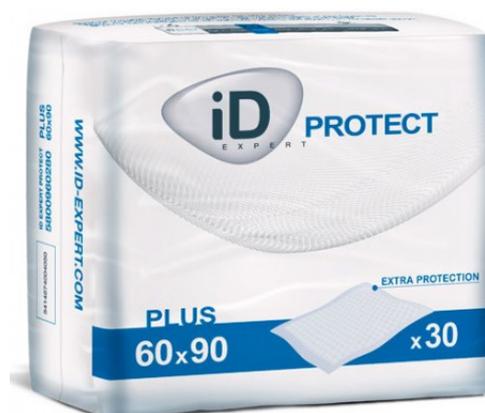

**EMPAPADOR REUTILIZABLE CON ALAS 4 CAPAS PU**  
**MEDIDA: 80 X 90 cm.**  
**REFERENCIA: 0935107 - UNIDAD**

**MEDIDA: 105 X 85 cm.**  
**REFERENCIA: CBX4738 - UNIDAD**

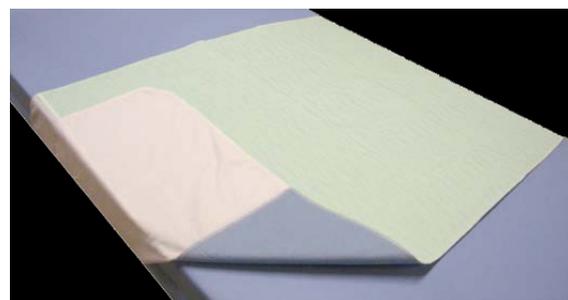

#### · INCONTINENCIA URINARIA ·



#### · Protección de colchones ·

##### **FUNDA COLCHÓN PU IGNÍFUGA AZUL 80 X 190 X 15 CM. CON CREMALLERA**

La funda de colchón con solapa Saniplus Biolastic va destinada a las personas encamadas con incontinencias, protege el colchón y la piel. Tejido impermeable de poliuretano flexible, antideslizante, transpirable, analérgico, ecológico, antiácaros e ignífugo. Gran durabilidad, muy fácil de limpiar con una esponja con desinfectantes habituales y lavable a 90°, Autoclave 120 °C.

**REFERENCIA: GER0390 - UNIDAD**

##### **FUNDA COLCHÓN PU IGNÍFUGA AZUL 90 X 190 X 15 CM. CON CREMALLERA**

**REFERENCIA: GER0179 - UNIDAD**

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

**· PRODUCTOS DE BARRERA ·**
**· PRODUCTOS DE BARRERA ·**
**· Batas ·**
**BATA QUIRÚRGICA ESTANDAR UNIDIX**

Bata quirúrgica de protección con toalla de celulosa de 30 x 40 cm. Diseñada para la protección individual durante intervenciones quirúrgicas así como medida para el mantenimiento de la asepsia y barrera contra el riesgo de infecciones.

Empaquetadas individualmente y esterilizado por Óxido de Etileno; un solo uso.

**Características Mangas:**

Largas y rematadas con puño ajustable de poliéster blanco.

Longitud manga: 60 cm.

Longitud puño: ≥8 cm.

**Características Cuerpo:**

Fabricado en SMMMS de grado médico.

Apariencia: Azul; cuello y puños blancos.

Gramaje: 35 g / m<sup>2</sup>.

**Medidas:**

o Mediana: Largo: 120 cm. / Ancho: 150 cm.

o Grande: Largo: 130 cm. / Ancho: 150 cm.

o X-Grande: Largo: 145 cm. / Ancho: 160 cm.

o XX-Grande: Largo: 165 cm. / Ancho: 160 cm.

Abertura hacia la espalda.

Cierre en cuello mediante velcro, en torso mediante cintas.



**PRECIO + 21% IVA**

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
SGSM11-35M/40	MEDIANA	Caja de 40 unidades
SGSM11-35L/40	GRANDE	Caja de 40 unidades
SGSM11-35XL/40	EXTRA GRANDE	Caja de 40 unidades
SGSM11-35XXL/40	XXL	Caja de 40 unidades

**BATA QUIRÚRGICA ESTÁNDAR REFORZADA UNIDIX**

Bata quirúrgica de protección con toalla de celulosa de 30 x 40 cm.

Diseñada para la protección individual durante intervenciones quirúrgicas así como medida para el mantenimiento de la asepsia y barrera contra el riesgo de infecciones.

Empaquetadas individualmente y esterilizado por Óxido de Etileno; un solo uso.

**Características Mangas:**

Largas y rematadas con puño ajustable de poliéster blanco.

Longitud manga: 60 cm.

Longitud puño: ≥8 cm.

**Características Cuerpo:**

Fabricado en SMMMS de grado médico.

Apariencia: Azul; cuello y puños blancos.

Gramaje: 35 g / m<sup>2</sup>.

**Medidas:**

o Mediana: Largo: 120 cm. / Ancho: 150 cm.

o Grande: Largo: 130 cm. / Ancho: 150 cm.

o X-Grande: Largo: 145 cm. / Ancho: 160 cm.

o XX-Grande: Largo: 160 cm. / Ancho: 165 cm.

Abertura hacia la espalda.

Cierre en cuello mediante velcro, en torso mediante cintas.

**Características Refuerzo:**

Fabricado en PP 20g y PE de 10g blando.

En mangas: 35 cm.

En pecho: 50 x 70 cm.



**PRECIO + 21% IVA**

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
PGSM11-35M/40	MEDIANA	Caja de 40 unidades
PGSM11-35L/40	GRANDE	Caja de 40 unidades
PGSM11-35XL/40	EXTRA GRANDE	Caja de 40 unidades
PGSM11-35XXL/40	XXL	Caja de 40 unidades

### CALZA DE PLÁSTICO UNIDIX



Calza fabricada con plásticos de nueva generación. Indicada para promover la higiene y limpieza en medios asépticos así evitamos la diseminación de microorganismos durante el transporte de pacientes a quirófano u otros servicios.

Idóneas para trabajos en los que el suelo permanece húmedo. Un solo uso, desechable.

Propiedades ajuste  
Goma elástica integrada.

REFERENCIA: 09019 - CAJA DE 100 UNIDADES  
COLOR: Azul

Propiedades Calza  
Poliétileno Clorado (CPE)

- Apariencia: Color azul o verde.
- Peso: 20g.
- Dimensiones: Largo: 36 cm. Ancho: 15 cm.

REFERENCIA: 09020 - CAJA DE 100 UNIDADES  
COLOR: Verde

### CALZAS DE TST / PP UNIDIX (VARIOS GRAMAJES)

Calza de tejido no tejido, indicada para promover la higiene y limpieza en medios asépticos así evitamos la diseminación de microorganismos durante el transporte de pacientes a quirófano u otros servicios.

Un solo uso, desechable.

Propiedades ajuste:  
· Goma elástica.  
· Cosido con hilo de poliéster.

Propiedades de las calzas:  
Fabricada en Polipropileno (PP).  
· Apariencia: Azul, verde o blanca.  
· Gramaje: 18 g / m<sup>2</sup> o 40 g / m<sup>2</sup>.  
· Dimensiones: ver tabla.  
· Transpirable.



REFERENCIA	GRAMAJE	COLOR	UNIDAD DE VENTA
0908101	18 gr/m <sup>2</sup>	Verde	Caja de 100 unidades
09021	18 gr/m <sup>2</sup>	Azul	Caja de 100 unidades
09024	40 gr/m <sup>2</sup>	Verde	Caja de 100 unidades
09022	40 gr/m <sup>2</sup>	Azul	Caja de 100 unidades
09166	40 gr/m <sup>2</sup>	Blanco	Caja de 100 unidades



### CALZA TEJIDO ANTIDESLIZANTE AZUL UNIDIX

Calza cubre zapato desechable confeccionado con tejido no tejido de polipropileno (PP), color blanco. Suela de polietileno clorado (CPE) anti-deslizante, de color azul. Fabricada con elástico blanco en todo el perímetro de apertura. Evita el deslizamiento de la suela del zapato con el suelo mojado. Uso preferente en hospitales, salas blancas e industria de alimentación.

REFERENCIA: 09025 - CAJA DE 100 UNIDADES



**CALZA DE ALTO RIESGO PP**  
**REFERENCIA: 09023 - CAJA DE 100 UNIDADES**



**CALZA TRANSPARENTE CON ELÁSTICO**  
 Botas protectoras desechables, alta calidad, sin costuras soldadas en la suela. Con goma de sujeción.

**REFERENCIA: GR60404 - CAJA DE 50 UNIDADES**



**CUBREBOTAS IMPERMEABLE ANTIDESLIZANTE MEDLINE**

Los cubrebotas impermeables de Medline son desechables y antideslizantes, y repelen los líquidos; cubren el calzado y la pierna hasta la rodilla para reducir la contaminación cruzada. El personal médico puede ajustar el cubrebotas gracias al cómodo cierre de velcro que está termosellado a la parte exterior para mejorar la fijación.

**REFERENCIA: NONE27144 - CAJA DE 150 UNIDADES**

**CALZA PP BLANCA INFANTIL 40 gr.**

Calzas infantiles de PP de color blanco.  
 Gramaje: 40 gr./m2.

**REFERENCIA: 35554 - CAJA DE 500 UNIDADES**



**· PRODUCTOS DE BARRERA ·**

**· Complementos ·**

**BRAGA MUJER CON ELÁSTICOS EN MUSLOS UNIDIX**

Braga de mujer con elásticos, color blanco.  
 Medida de ancho de pierna estirado 70 cm.  
 Medida de ancho superior estirado de 95 cm.  
 Longitud vertical de 31 cm.

**REFERENCIA: 253-E/100 - CAJA DE 100 UNIDADES**

**BRAGA MUJER CON ELÁSTICOS EN MUSLOS UNIDIX**

Braga de mujer con elásticos, color blanco.  
 Medida de ancho de pierna estirado 80 cm.  
 Medida de ancho superior estirado de 110 cm.  
 Longitud vertical de 35 cm.

**REFERENCIA: 02B68H/500 - CAJA DE 500 UNIDADES**





### SLIP CABALLERO TALLA ÚNICA UNIDIX

REFERENCIA: 254-AG - PACK DE 25 UNIDADES



### PANTALÓN CORTO DE PP

Fabricado en PP azul oscuro de 40 gr./m2.  
Elástico recubierto de algodón sin látex.

Medidas:

- Longitud: 140 cm.
- Medidas piernas: 32 cm.
- Longitud de cintura: 53 cm.

REFERENCIA: 100-PC - PACK DE 100 UNIDADES

### DELANTAL DESECHABLE BLANCO UNIDIX

Delantal de plástico impermeable para colocar sobre la ropa y protegerse de posibles manchas en la realización de diferentes procedimientos.

Uso idóneo para diferentes ámbitos como hostelería, limpieza y sanitario.


Un solo uso, desechable. 100% exento de látex.

Fabricado en LDPE blanco de 0,02 mm. de espesor.

Dimensiones de 107 x 71 cm. Orificio superior de 15,5 cm.

Cintas de sujeción a la altura del abdomen.

REFERENCIA: DP001 - PACK DE 100 UNIDADES

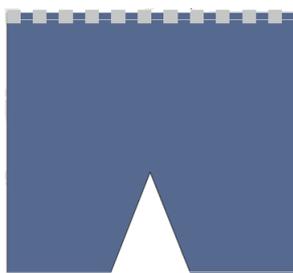

### BOXER CABALLERO AZUL IBP

Fabricado en PP de 35 gr./m2.

Elástico recubierto de algodón sin látex.

Medidas:

- Largo desde cintura hasta la pata: 48 cm.
- Ancho de cintura estirado: 60 cm.
- Ancho de cada pata: 30 cm.
- Perímetro de la cintura: 120 cm.

REFERENCIA: 05-P/109 - PACK DE 200 UNIDADES




### MANGUITO DESECHABLE DE PLÁSTICO BLANCO

Manguito de polietileno (plástico) de color blanco.

Medida de 20 x 40 estirado.

REFERENCIA: 03/01/020 - PACK DE 100 UNIDADES

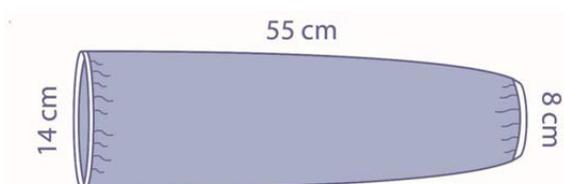

### MANGUITO CUBREBRAZOS CON ELÁSTICOS MEDLINE

Fabricado en polipropileno con estructura SMMS.

REFERENCIA: 599CEB - CAJA DE 150 UNIDADES

Haga su pedido vía web, por teléfono o email


**CUBREGAFAS DE PROTECCIÓN 3M OX1000**

Cubregafas diseñados para colocarse sobre las gafas graduadas, serie OX de 3M, modelo OX1000.

**REFERENCIA: OX1000 - CAJA DE 20 UNIDADES**

**Gafa de protección Policarbonato Visitor**

Gafa Visitor de SteelPRO uni-lente de policarbonato, con tratamiento anti-ralladura. Lente de protección contra filtros ultravioletas UV.

**REFERENCIA: 9161306 - UNIDAD**


**Gafa panorámica estanca Bolle Coverall**

Gafas de seguridad y protección panorámicas Bollé Protección modelo Coverall Cover-si. Modelo de gafa estanca. Montura ligera y cómoda.

**REFERENCIA: 02090COVERSI - UNIDAD**

**GORRO CIRCULAR UNIDIX**

Gorro circular fabricado en tejido no tejido (PP) y goma de sujeción.

Actúa como barrera de protección para el personal sanitario y pacientes al prevenir la transmisión de agentes patógenos y reducir la contaminación por caída del cabello en áreas limpias y/o estériles.

Un solo uso, desechable.

Propiedades ajuste:

Goma elástica. Hilo de poliéster.

Propiedades Gorro:

Fabricado en tejido sin tejer (PP)

· Apariencia: Azul, verde o blanco

· Gramaje: 11g/m<sup>2</sup> o 40 g / m<sup>2</sup>

· Longitud total: 50 cm.

· Propiedades físicas:

o Elongación en sentido vertical: 102.3%

o Elongación en sentido del tejido: 104.4%

o Fuerza de rasgado vertical: 18.2 N.

o Fuerza de rasgado en sentido del tejido: 14.3 N.



REFERENCIA	GRAMAJE	COLOR	UNIDAD DE VENTA
09001	11 gr/m <sup>2</sup>	Verde	Caja de 100 unidades
0908104	11 gr/m <sup>2</sup>	Azul	Caja de 100 unidades
09002	11 gr/m <sup>2</sup>	Blanco	Caja de 100 unidades
09001-1	40 gr/m <sup>2</sup>	Verde	Caja de 100 unidades
09081-1	40 gr/m <sup>2</sup>	Azul	Caja de 100 unidades

## GORRO QUIRÚRGICO UNIDIX

Gorro quirúrgico con cintas de sujeción, de tejido no tejido de polipropileno (PP). 100% exento de látex. Hipoalergénico. Su función es contribuir a la asepsia y reducir los riesgos de contaminación entre el personal y el paciente, así como la caída del cabello sobre el campo quirúrgico para evitar posibles transmisiones no deseadas.

### Propiedades

- Elongación en sentido vertical: 104.2%
- Elongación en sentido del tejido: 105.1%
- Fuerza de rasgado vertical: 19.1 N
- Fuerza de rasgado en sentido del tejido: 15.2 N

### Tejido sin tejer de PP

- Gramaje: 16gr/m2, 25gr/m2 o 40gr/m2
- Longitud total: 63 cm.
- Ancho total: 13 cm.

### Cinta de agarre

- Hilo de poliéster.
- Garantiza una correcta sujeción del gorro.
- Mayor seguridad de agarre.



REFERENCIA	GRAMAJE	COLOR	UNIDAD DE VENTA
09011	16 gr/m2	Verde	Caja de 100 unidades
09010	16 gr/m2	Azul	Caja de 100 unidades
09310	25 gr/m2	Verde	Caja de 100 unidades
09013	40 gr/m2	Verde	Caja de 100 unidades
09010-1	40 gr/m2	Azul	Caja de 100 unidades

## · PRODUCTOS DE BARRERA ·

## · Mascarillas ·

### MASCARILLA DE PAPEL BLANCA CON GOMAS UNIDIX

Mascarilla de papel blanca con gomas, desechable 100% Celulosa, de un solo uso con pliegues, elásticos y cosido especial para su uso en centros de trabajo sanitarios o en el sector industrial o alimentario, en negocios como carnicerías, pescaderías, panaderías, ... asegurando una máxima higiene y protección.

REFERENCIA: 09030-1 - CAJA DE 100 UNIDADES



### MASCARILLA 3 CAPAS TIPO I CON GOMAS O CINTAS UNIDIX

Mascarilla quirúrgica de tejido no tejido con 3 capas.

Sujeción con gomas o cintas.

Indicado para la protección tanto de personal sanitario como de paciente de la transmisión de microorganismos filtrando partículas y bacterias vía aérea.

Mascarilla desechable fabricada de tejido no tejido de polipropileno de tres capas.

Permite una fácil inhalación y exhalación del aire.

Disponibles en varios colores.



REFERENCIA	COLOR	Modelo	UNIDAD DE VENTA
09032	Azul	Con cintas	Caja de 50 unidades
09031	Verde	Con cintas	Caja de 50 unidades
090500	Rosa	Con cintas	Caja de 50 unidades
094401	Azul	Con gomas	Caja de 50 unidades
094402	Verde	Con gomas	Caja de 50 unidades
090700	Rosa	Con gomas	Caja de 50 unidades
090600	Negra	Con gomas	Caja de 50 unidades



Haga su pedido vía web, por teléfono o email

## MASCARILLA 3 CAPAS TIPO IIR CON GOMAS O CINTAS UNIDIX

**MODELO: CON CINTAS**  
**REFERENCIA: 090900 - CAJA DE 50 UNIDADES**

**MODELO: CON GOMAS**  
**REFERENCIA: 090800 - CAJA DE 50 UNIDADES**



## MASCARILLA DE PAPEL BLANCA CON GOMAS UNIDIX

Mascarilla de tejido no tejido cónica para uso tanto por parte de paciente como de personal sanitario protegiéndose en ambientes con polvo y partículas no tóxicas. Exenta de látex.

Sujeción con gomas y mayor ajuste nasal gracias a su clip de ajuste.

Un solo uso, desechables.

Fabricado en Polipropileno (PP) de color blanco.

Dimensión: 120 x 125 mm.

Forma ergonómica, de amplitud suficiente para cubrir nariz y boca.

Clip nasal fabricado en aluminio, adaptable.

Goma elástica blanca de 18 x 1 mm.

**REFERENCIA: 09033 - CAJA DE 50 UNIDADES**



## · PRODUCTOS DE BARRERA ·

## · Pantallas protectoras ·

## MÁSCARA DE PROTECCIÓN UNIDIX

Máscara de protección para la zona facial y las membranas mucosas asociadas (ojos, nariz y boca). Indicado especialmente en procedimientos con riesgo alto de salpicaduras o fluidos potencialmente contaminados.

Permite también su uso conjunto con mascarillas quirúrgicas y/o respiradores en situaciones que requieran la más alta protección.

Un solo uso, desechable. 100% exento de látex.

Banda de sujeción azul de 26 cm. aprox, con refuerzo esponjoso en el interior.


Pantalla fabricada en PET transparente de 33 x 22 x 0,2 mm., antiempañamiento.

**REFERENCIA: GB14866-2006 - UNIDAD**



## VISERA DE PROTECCIÓN OMNIA CON CINTAS

**REFERENCIA: 10.M020 - CAJA DE 12 UNIDADES**

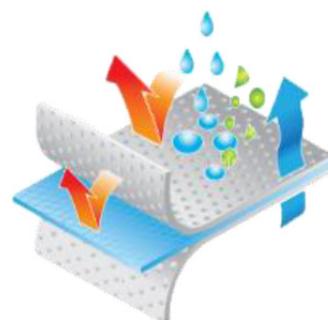

Pijama quirúrgico completo compuesto por camisa y pantalón. Utilizado como prenda de trabajo ya que su material SMS de baja emisión de partículas y su control de carga biológica mantiene un alto nivel de higiene contribuyendo al control de la infección.

- Empaquetado en un envase unitario, el conjunto camisa y
- Material SMS 35g/m<sup>2</sup>.
- Casaca con cuello en pico.
- Diseño con 3 bolsillos en la casaca.
- Cierre del pantalón con cintas.

#### PIJAMA COMPLETO SMS AZUL UNIDIX

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
PIJAMA-S	PEQUEÑO	Caja de 50 unidades
PIJAMA-M	MEDIANO	Caja de 50 unidades
PIJAMA-L	GRANDE	Caja de 50 unidades
PIJAMA-XL	EXTRA GRANDE	Caja de 50 unidades
PIJAMA-XXL	XXL	Caja de 50 unidades

#### PIJAMA COMPLETO SMS AZUL

REFERENCIA	TALLA	UNIDAD DE VENTA
22172	PEQUEÑO	Caja de 10 unidades
22173	MEDIANO	Caja de 10 unidades
22146	GRANDE	Caja de 10 unidades
22174	EXTRA GRANDE	Caja de 10 unidades

#### PIJAMA POR PARTES SMS AZUL - CUELLO PICO UNIDIX

REFERENCIA	PARTE	TALLA	UNIDAD DE VENTA
PIJAMA-CA-S	CHAQUETA	S	Caja de 50 unidades
PIJAMA-CA-M	CHAQUETA	M	Caja de 50 unidades
PIJAMA-CA-L	CHAQUETA	L	Caja de 50 unidades
PIJAMA-CA-XL	CHAQUETA	XL	Caja de 50 unidades
PIJAMA-CA-XXL	CHAQUETA	XXL	Caja de 50 unidades
PIJAMA-PA-M	PANTALÓN	M	Caja de 50 unidades
PIJAMA-PA-L	PANTALÓN	L	Caja de 50 unidades
PIJAMA-PA-XL	PANTALÓN	XL	Caja de 50 unidades
PIJAMA-PA-XXL	PANTALÓN	XXL	Caja de 50 unidades

**PIJAMA POR PARTES**

REFERENCIA	PARTE	TALLA	UNIDAD DE VENTA
PS9110S	CHAQUETA	S-M	Caja de 50 unidades
PM9110S	CHAQUETA	M	Caja de 50 unidades
PL9110S	CHAQUETA	L	Caja de 50 unidades
PXL9110S	CHAQUETA	XL	Caja de 50 unidades
P2XL9110S	CHAQUETA	XXL	Caja de 50 unidades
PS9110P	PANTALÓN	S-M	Caja de 50 unidades
PM9110P	PANTALÓN	M	Caja de 50 unidades
PL9110P	PANTALÓN	L	Caja de 50 unidades
PXL9110P	PANTALÓN	XL	Caja de 50 unidades
P2XL9110P	PANTALÓN	XXL	Caja de 50 unidades

**PIJAMA POR PARTES SMS DE COLOR VERDE**

REFERENCIA	PARTE	TALLA	UNIDAD DE VENTA
P42PGXS-S	CHAQUETA	XS	Caja de 50 unidades
P42PGS-S	CHAQUETA	S	Caja de 50 unidades
P42PGM-S	CHAQUETA	M	Caja de 50 unidades
P42PGL-S	CHAQUETA	L	Caja de 50 unidades
P42PGXL-S	CHAQUETA	XL	Caja de 50 unidades
P42PGXS-P	PANTALÓN	XS	Caja de 50 unidades
P42PGS-P	PANTALÓN	S	Caja de 50 unidades
P42PGM-P	PANTALÓN	M	Caja de 50 unidades
P42PGL-P	PANTALÓN	L	Caja de 50 unidades
P42PGXL-P	PANTALÓN	XL	Caja de 50 unidades

**PIJAMA QUIRÚRGICO POR PARTES ADVANCED COLOR MALVA**

REFERENCIA	PARTE	TALLA	UNIDAD DE VENTA
P42PPS-S	CHAQUETA	P	Caja de 50 unidades
P42PPM-S	CHAQUETA	M	Caja de 50 unidades
P42PPL-S	CHAQUETA	L	Caja de 50 unidades
P42PPXL-S	CHAQUETA	XL	Caja de 50 unidades
P42PPS-P	PANTALÓN	P	Caja de 50 unidades
P42PPM-P	PANTALÓN	M	Caja de 50 unidades
P42PPL-P	PANTALÓN	L	Caja de 50 unidades
P42PPXL-P	PANTALÓN	XL	Caja de 50 unidades

### CASACA AZUL OSCURO UNIDIX (VARIOS GRAMAJES)

Bata de tejido sin tejer, sin mangas a modo de casaca y con cierre mediante cintas a la cintura. Ideada para cubrir a su usuario y proporcionar intimidad durante su estancia hospitalaria especialmente pensada para la realización de pruebas médicas.

Un solo uso, desechables.

Cuello redondo, cierre con cintas, sin mangas.

Fabricado en polipropileno (PP) de color azul oscuro.

Abertura hacia la espalda.

Sistema de cierre mediante cintas.

Diferentes medidas y gramajes disponibles.



PRECIO + 21% IVA

REF.	GRAMAJE	LONGITUD	ANCHO	UNIDAD DE VENTA
044A30	30 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
044A40A	40 gr. / m2	110 cm.	150 cm.	Pack de 10 uds.
044A40Q	40 gr. / m2	110 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
044A40	40 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
044A50	50 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.

### CASACA INFANTIL AZUL OSCURO UNIDIX

MEDIDA: 75 X 100 cm. - GRAMAJE: 50 gr./m2

REFERENCIA: 044A50I - PACK DE 10 UNIDADES

### CASACAS SMS UNIDIX

Casaca de tejido no tejido (SMS), sin mangas y sistema de cierre mediante cintas. Color azul claro.

Ideada para cubrir a su usuario y proporcionar intimidad durante su estancia hospitalaria así como durante la realización de pruebas médicas.

Un solo uso, desechables. 100% exentas de látex.

Cuello redondo con sistema de cierre mediante cintas. Sin mangas. Abertura para posicionamiento delantero o trasero.

Diferentes gramajes y medidas disponibles.

Abertura con sistema de cierre mediante cintas.



REF.	GRAMAJE	LONGITUD	ANCHO	UNIDAD DE VENTA
02-10	28 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
02-20	35 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
02-30	28 gr. / m2	110 cm.	150 cm.	Pack de 10 uds.
02-40	28 gr. / m2	110 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
044A200	35 gr. / m2	120 cm.	170 cm.	Pack de 10 uds.
044A40ZA	40 gr. / m2	130 cm.	180 cm.	Pack de 10 uds.



### BATA MANGA CORTA UNIDIX (VARIOS MODELOS)

Bata para cubrirse de modo individual de manga corta, fabricada en tejido sin tejer (PP) de azul claro o azul oscuro.

Diferentes gramajes y colores según modelo.

Barrera entre personal sanitario y/o visitante y pacientes, fármacos o materiales de desecho cuando el riesgo de contaminación es limitado.

Desechables, un solo uso. Libre de látex.

Diferentes medidas y gramajes disponibles.

Cuello redondo y ajustes mediante cintas. Abertura hacia la espalda.

REF.	Color	GRAMAJE	LONGITUD	ANCHO	UNIDAD DE VENTA
09157	Azul oscuro	40 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
09158	Azul claro	40 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
09168	Azul claro	50 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
659140	Azul claro	60 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.

### BATA DE MANGA LARGA CON PUÑOS DE ALGODÓN UNIDIX

Bata de protección de manga larga, fabricada en SMS con puños de algodón.

Diseñada para prevenir la diseminación de polvo y bacterias entre paciente, profesional sanitario o visitantes así como polvo, cabello y/o partículas propias.

Desechables, un solo uso. Libre de látex.

Propiedades particulares:

- Cuello redondo.
- Ajuste mediante cintas.
- Abertura.
- Mangas largas con puños.

Fabricada en SMS

- Apariencia: Azul oscuro.
- Gramaje: 40g/m2.
- Dimensiones: Largo: 150 cm. y ancho: 150 cm.
- Puños blancos de algodón.

**REFERENCIA: 09180 - PACK DE 10 UNIDADES**



### BATA DE MANGA LARGA CON PUÑOS DE ALGODÓN UNIDIX

Bata de protección de manga larga verde, fabricada en tejido sin tejer con puños de algodón.

Diseñada para prevenir la diseminación de polvo y bacterias entre paciente, profesional sanitario o visitantes así como polvo, cabello y/o partículas propias.

Desechables, un solo uso. Libre de látex.

Propiedades particulares:

- Cuello redondo
- Ajuste mediante cintas
- Abertura.
- Mangas largas con puños.

Propiedades Bata:

- Tejido sin tejer; Polipropileno
- Gramaje: 30g/m2
- Dimensiones: Largo: 115 cm. y ancho: 137cm
- Puños blancos de algodón.

**REFERENCIA: 22042 - PACK DE 10 UNIDADES**





### BATA PROTECCIÓN MANGA LARGA UNIDIX

Bata de protección de manga larga, fabricada en tejido sin tejer, diferentes colores y gramajes. Diseñada para prevenir la diseminación de microorganismos entre paciente, profesional sanitario, visitantes... tanto durante procedimientos médicos como durante el traslado de pacientes.

Un solo uso, desechables.

Cuello redondo, con cintas para un buen ajuste. Puños elásticos.

Tejido sin tejer; Polipropileno.

Diferentes colores, gramajes y medidas disponibles.

Abertura trasera.

Cierre mediante cintas.

**PRECIO + 21% IVA**

REF.	Color	GRAMAJE	LONGITUD	ANCHO	UNIDAD DE VENTA
09160	Verde	20 gr. / m2	100 cm.	140 cm.	Pack de 200 uds.
09151	Verde	25 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
09184	Verde	25 gr. / m2	100 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
09152	Verde	30 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
09150	Azul claro	30 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
09156	Blanco	30 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.
09155	Azul oscuro	60 gr. / m2	115 cm.	137 cm.	Pack de 10 uds.



### SET BATA MANGA CORTA AZUL MARINO 50 gr. + ZAPATILLAS UNIDIX

Set compuesto por diferentes artículos que favorecen la intimidad y protección del paciente durante los procedimientos médicos, cirugías ambulatorias, realización de pruebas o a su llegada al hospital.

Compuesto por bata de manga corta y zapatillas.

Todos los artículos desechables, de un solo uso. Libre de látex.

Zapatillas fabricadas en PP + EVA de color blanco, diseño con dedos cubiertos.

- Gramaje superior de 30 gr. / m2.

- Gramaje inferior de 70 gr. / m2.

- Medidas: Exteriores 29 x 11 x 4 cm. y esponja 29 x 11 x 0.3 cm.

Bata de manga corta fabricada en PP de color azul marino. Abertura hacia la espalda y cierre con cintas.

- Gramaje: 50 gr. / m2.

- Dimensiones: Largo: 115 cm., ancho: 137 cm. y Manga corta.

**REFERENCIA: 7200043 - UNIDAD**

Haga su pedido vía web, por teléfono o email

BATA - Gramaje (g/m <sup>2</sup> )		REFERENCIA	COMPLEMENTOS - Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	
PP	Manga corta 50 (115x137)	7200043	Zapatillas blancas	
	Manga larga 60 (130x150)	7200038 -PROC. MENORES-	Zapatillas blancas	
	Manga larga 20 (115x137)	7200040	Calzas 20	
			Gorro elástico 16	
			Gorro 13	

CASACA – Gramaje (g/m <sup>2</sup> )		REFERENCIA	COMPLEMENTOS - Gramaje (g/m <sup>2</sup> )				
PP		Casaca 50 (72x100)	7200051 - PEDIÁTRICO-	Calzas 30		Gorro 40	
		Casaca 40 (115x137)	7200050 - ADULTO-	Calzas 30		Gorro 40	
		Casaca 50 (115x137)	7200044	Calzas 30		Gorro 40	
			7200055	Calzas 40		Gorro 40	
			7200045	Braga 35		Gorro 10	

CASACA - Gramaje (g/m <sup>2</sup> )		REFERENCIA	COMPLEMENTOS - Gramaje (g/m <sup>2</sup> )	
SMS	Casaca 30 (115x150)	7200052 -SET PACIENTE-	Calza 18	
	Casaca 35 (115x150)	7200053 -SET PACIENTE-	Slip 40	
			Gorro 13	

### SELLADOR TÉRMICO MÉDICO GD 301

Sellador médico de calor constante para el cierre de bolsas y de bobinas. Extremadamente confiable y de uso fácil, gran estructura y atención al detalle.

GD 301 es una máquina compacta que es ideal para el uso en dentistas, los doctores y las cirugías veterinarias o los laboratorios.

REFERENCIA: 112GD3010000 - UNIDAD



### SELLADORA DE BOLSAS MANUAL POR IMPULSO TUTTNAUER TSM260M

Un sellador sencillo y práctico.

Sellador con función de corte y bandeja para colocar los rollos de manga. Con indicador acústico de estanqueidad.

La esterilización solo es eficaz si se conserva desde el principio hasta el momento en que se utilizan los instrumentos. El proceso de sellado garantiza que los instrumentos se envasen herméticamente después de la esterilización y que permanezcan en perfectas condiciones hasta su uso.

Los selladores Tuttinauer son rápidos y fiables. Cumplen con las más estrictas normas de calidad y seguridad (EN868-4 / 6 y DIN 58953-7).



REFERENCIA: TSM260M - UNIDAD

### SELLADORA AUTOMÁTICA SMEG SGR10S

- Activación del sistema de sellado automático.
- Margen de sellado ajustable de 5 a 35 mm.
- Costura de sellado de anchura 12 mm.
- Máxima estanqueidad longitud ilimitada.
- Sellado de temperatura ajustable desde 0 a 220 °C.
- Velocidad de salida 10 m / min.
- Revestimiento exterior en acero inoxidable.
- Dimensiones ANxPxAL: 500 x 260 x 140 mm.
- Conexión eléctrica: 1/N/PE 230 V - 50 Hz - 500 W max.

REFERENCIA: SGR10S - UNIDAD



### SELLADOR TÉRMICO FAMOS F108 SERIES

Los selladores rotatorios por calor de la serie F108 PROTEC representan los modelos básicos dentro de la gama del sellador de Famos.

Los modelos F108 no poseen impresora interna.

Los modelos de la serie de F108 PROTEC se distinguen por una operación controlada del menú y un sistema controlado del procesador.

El ajuste y control digital de la temperatura son posibles a través de la pantalla LCD.

Ambos modelos se equipan de otra característica de la seguridad que pare la máquina del aislamiento cuando hay una diferencia de la temperatura de 5°C con respecto a la temperatura determinada y a la temperatura que se está midiendo realmente.

Dispone de un contador de producción con alarma acústica. Además de control y conexión USB. Una conexión de Ethernet puede ser integrada opcionalmente.

Todos los modelos se equipan de un puerto de comunicación RS232 para la fácil actualización del software.

REFERENCIA: 112F108-PROT - UNIDAD

